

# EI 150c

# EI 250c

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 12-КАНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ MORTARA

12-КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ



#### • КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Компактный и легкий электрокардиограф с возможностью установки на передвижной тележке. Встроенный термопринтер для печати 6 или 12 каналов ЭКГ в формате 108мм или A4.

#### • ЦВЕТНОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

Яркий цветной дисплей высокого разрешения для отображения 12-канальной ЭКГ в процессе регистрации и последующего просмотра сохраненных ЭКГ.

#### • АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКГ

Широко распространенный и отлично зарекомендовавший себя алгоритм автоматической интерпретации ЭКГ покоя VERITAS™, включающий в себя специализированные критерии для педиатрической интерпретации.

#### • ПРОВОДНОЙ ИЛИ БЕСПРОВОДНОЙ КАБЕЛЬ ПАЦИЕНТА

Выбор между классическим кабелем пациента AM12™ и инновационным беспроводным кабелем пациента WAM™. Все кабели оснащены сменными отведениями, индикатором качества сигнала, функциональными клавишами для старта записи ЭКГ и печати ритма.

#### • ФУНКЦИЯ «ЛУЧШИЕ 10»

Функция выбора «лучших 10» секунд (участка записи с наилучшим качеством) из непрерывной 5-минутной записи ЭКГ, сокращающая время записи ЭКГ и избавляющая от необходимости повторенной записи.

#### • РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Русскоязычный интерфейс аппарата (включая интерпретацию), а также полноформатная русскоязычная клавиатура с клавишами быстрого доступа к регистрации ЭКГ, печати ритма и передачи данных.


#### • СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Широкий набор сетевых возможностей, включая аналоговый модем, USB, LAN, WLAN для передачи и получения данных как из собственных программных решений Mortara EScribe™ и Athena, так и коммуникации с другими МИС по современным протоколам в форматах XML, PDF, UNIPRO32 и DICOM®32.

#### • РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Стандартный срок гарантийного обслуживания 24 месяца.

 Mortara

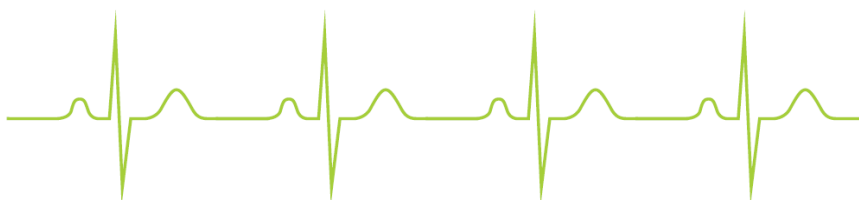

## MORTARA INSTRUMENT, INC.

7865 North 86th Street  
Milwaukee, WI 53224  
U.S.A.

Tel: 414.354.1600

Tel: 800.231.7437

Service: 888.MORTARA

Fax: 414.354.4760

[WWW.MORTARA.COM](http://WWW.MORTARA.COM)

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ MORTARA INSTRUMENT В РОССИИ И СНГ

## ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»

199178 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10-я линия В.О. 17/2 А

офис 1Н

+7 812 4485775

+7 495 6516122

107078 МОСКВА

1-й Басманный пер. 5/20

строение 2, офис 40

+7 495 6087185

+7 495 6516122

[WWW.MORTARA.RU](http://WWW.MORTARA.RU)

[WWW.MEDSYSTEMS.RU](http://WWW.MEDSYSTEMS.RU)



## СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

+7 812 4485775

+7 495 6516122

tech@medsystems.ru

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

<b>ТИП АППАРАТА</b>	12-канальный электрокардиограф
<b>СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ</b>	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
<b>ДИСПЛЕЙ</b>	Цветной ЖК-дисплей с подсветкой, 1/4 VGA (320x240)
<b>ОТОБРАЖЕНИЕ ОТВЕДЕНИЙ</b>	3, 4+4, 6+6
<b>ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛА ЭКГ</b>	1 000 Гц/канал для записи и анализа, 40 000 Гц/канал для детекции работы кардиостимулятора
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>	Алгоритм автоматической интерпретации ЭКГ VERITAS; коммуникационные опции модем, LAN, WLAN; сумка для переноски и хранения, мобильная тележка
<b>ТЕРМОБУМАГА</b>	<b>ELI150c:</b> Перфорированная двойная Z-образная термобумага 108мм, 200 листов <b>ELI250c:</b> Перфорированная Z-образная термобумага формата А4, 250 листов
<b>ТЕРМОПРИНТЕР</b>	Микропроцессорный, 8 точек/мм
<b>СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ</b>	5, 10, 25 или 50 мм/с
<b>КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ</b>	5, 10 или 20 мм/мкВ
<b>ФОРМАТ ПЕЧАТИ</b>	<b>ELI150c:</b> Стандарт или Кабрера - 3, 3+1, 3+3, 6 <b>ELI250c:</b> Стандарт или Кабрера - 3+1, 3+3, 6, 6+6, 12
<b>ФОРМАТ ПЕЧАТИ РИТМА</b>	<b>ELI150c:</b> 3 или 6 конфигурируемых каналов <b>ELI250c:</b> 3, 6 или 12 конфигурируемых каналов
<b>ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ</b>	0.05 - 300 Гц
<b>ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА</b>	Фильтр дрейфа изолинии, сетевой фильтр 50/60 Гц, фильтры сигнала ЭКГ 40, 150 или 300Гц
<b>КОНВЕРТЕР АЦП</b>	20 bit (1.17 мкВ LSB)
<b>КЛАСС УСТРОЙСТВА</b>	Класс I, тип CF, с защитой от дефибрилляции
<b>ПАМЯТЬ ЭКГ</b>	Внутренняя память на 40 ЭКГ с возможностью расширения до 200 ЭКГ
<b>ВЕС</b>	<b>ELI150c:</b> 3.3 кг, включая аккумуляторную батарею <b>ELI250c:</b> 5.1 кг, включая аккумуляторную батарею
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>	<b>ELI150c:</b> 29.2 x 30.5 x 10.2 см (Г x Ш x В) <b>ELI250c:</b> 39.4 x 43.2 x 10.2 см (Г x Ш x В)
<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>	Автономное питание от встроенной аккумуляторной батареи, сетевое питание 100-240 В, 50/60 Гц, 110ВА
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД</b>	24 месяца

\*характеристики аппаратуры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления