

ELI 230

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 12-КАНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ MORTARA

12-КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ



• УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Полнофункциональный 12-канальный кардиограф в ультракомпактном исполнении. Высококачественная регистрация сигнала ЭКГ, надежный и достоверный анализ, встроенный термопринтер для печати 6 или 12 каналов ЭКГ в формате 210 мм.

• ЦВЕТНОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

Яркий цветной дисплей высокого разрешения для отображения 12-канальной ЭКГ в процессе регистрации и последующего просмотра сохраненных ЭКГ.

• АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКГ

Широко распространенный и отлично зарекомендовавший себя алгоритм автоматической интерпретации ЭКГ покоя VERITAS™, включающий в себя специализированные критерии для педиатрической интерпретации.

• ПРОВОДНОЙ ИЛИ БЕСПРОВОДНОЙ КАБЕЛЬ ПАЦИЕНТА

Выбор между классическим кабелем пациента AM12™ и инновационным беспроводным кабелем пациента WAM™. Все кабели оснащены сменными отведениями, индикатором качества сигнала, функциональными клавишами для старта записи ЭКГ и печати ритма.

• ВЫСОКАЯ АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ

Возможность регистрации до 200 ЭКГ на одном заряде встроенной аккумуляторной батареи. Режимы быстрого заряда аккумулятора и работы непосредственно от сети. Высокая мобильность использования.


• РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Русскоязычный интерфейс аппарата (включая интерпретацию), а также функциональные клавиши быстрого доступа к регистрации ЭКГ и печати ритма.

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Стандартный срок гарантийного обслуживания 24 месяца.

 Mortara

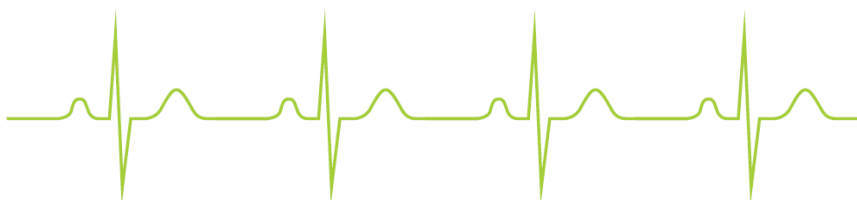

MORTARA INSTRUMENT, INC.

7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.

Tel: 414.354.1600

Tel: 800.231.7437

Service: 888.MORTARA

Fax: 414.354.4760

WWW.MORTARA.COM

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
MORTARA INSTRUMENT
В РОССИИ И СНГ****ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»**

199178 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10-я линия В.О. 17/2 А

офис 1Н

+7 812 4485775

+7 495 6516122

107078 МОСКВА

1-й Басманный пер. 5/20

строение 2, офис 40

+7 495 6087185

+7 495 6516122

WWW.MORTARA.RU

WWW.MEDSYSTEMS.RU

**СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

+7 812 4485775

+7 495 6516122

tech@medsystems.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ТИП АППАРАТА	12-канальный портативный электрокардиограф
СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
ДИСПЛЕЙ	Цветной ЖК-дисплей с подсветкой, 1/4 VGA (320x240)
ОТОБРАЖЕНИЕ ОТВЕДЕНИЙ	4+4, 6+6
ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛА ЭКГ	1 000 Гц/канал для записи и анализа, 40 000 Гц/канал для детекции работы кардиостимулятора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Алгоритм автоматической интерпретации ЭКГ VERITAS; USB; сумка для переноски и хранения, компактная мобильная тележка
ТЕРМОБУМАГА	Рулонная термобумага 210мм, (15 м)
ТЕРМОПРИНТЕР	Микропроцессорный, 8 точек/мм
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	5, 10, 25 или 50 мм/с
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	5, 10 или 20 мм/мкВ
ФОРМАТ ПЕЧАТИ	Стандарт или Кабрера - 3+1, 6, 12
ФОРМАТ ПЕЧАТИ РИТМА	3, 6 или 12 конфигурируемых каналов
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	0.05 - 300 Гц
ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА	Фильтр дрейфа изолинии, сетевой фильтр 50/60 Гц, фильтры сигнала ЭКГ 40, 150 или 300Гц
КОНВЕРТЕР АЦП	20 bit (1.875 мкВ LSB)
КЛАСС УСТРОЙСТВА	Класс I, тип CF, с защитой от дефибрилляции
ПАМЯТЬ ЭКГ	Внутренняя память на 20 ЭКГ
ВЕС	3.63 кг, включая аккумуляторную батарею
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	29.2 x 20.3 x 10.2 см (Г x Ш x В)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Автономное питание от встроенной аккумуляторной батареи, сетевое питание 100-240 В, 50/60 Гц, 110ВА
ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД	24 месяца

*характеристики аппаратуры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления